


CombiScreen PLUS Urin-Teststreifen



- mit Ascorbinsäureschutz
- erfüllen höchste Qualitätsansprüche
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- automatische und visuelle Auswertung

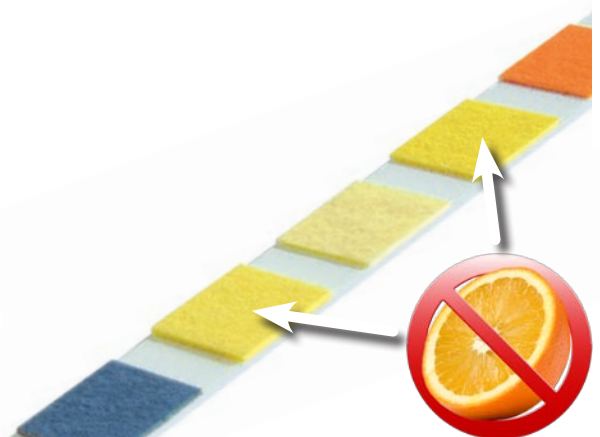

combi[®] screen PLUS

Glucose
Ascorbinsäure
Keton
Protein
pH-Wert
Blut
Nitrit
Leukozyten
Spez. Gewicht
Bilirubin
Urobilinogen



**ASCORBIC
ACID
PROTECTED**

Artikel	Art.-Nr.	Inh.	Glucose	Ascorbinsäure	Keton	Protein	pH-Wert	Blut	Nitrit	Leukozyten	Spez. Gewicht	Bilirubin	Urobilinogen
Glucose PLUS	94 501	50		✓									
	94 101	100		✓									
Nitrit PLUS	94 506	50							✓				
3 PLUS	94 508	50	✓			✓	✓						
	94 108	100	✓			✓	✓						
5+N PLUS	94 535	50	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	94 135	100	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
5+Leuko PLUS	94 517	50	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
	94 117	100	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
9 PLUS	94 115	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
9+Leuko PLUS	94 250	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	94 200	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
10 SL PLUS	94 120	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 SYS PLUS	94 100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ascorbinsäure, besser bekannt als Vitamin C, wird in erheblichem Maße über Lebensmittel und Vitaminpräparate aufgenommen. Der größte Teil wird jedoch unverändert wieder über den Urin ausgeschieden. Daher weist ein großer Anteil der Bevölkerung einen deutlichen Ascorbinsäurespiegel im Harn auf.

Dieser führt bei Urinteststreifen vieler Hersteller zu erniedrigten oder falsch negativen Ergebnissen beim Blut- und Glucosenachweis. Hierdurch werden diagnostische oder therapeutische Maßnahmen möglicherweise erst verspätet eingeleitet.

Unsere CombiScreen PLUS Teststreifen bieten hier aufgrund ihres integrierten Ascorbinsäureschutzes eine deutlich höhere Sicherheit.

GOÄ

	visuell	maschinell
Abr.-Ziffer:	3511	3652
einf. Satz:	2,91 Euro	2,04 Euro
2,3-fach:	3,35 Euro	2,35 Euro
3,5-fach:	3,79 Euro	2,65 Euro



	visuell	maschinell
Abr.-Ziffer:	32030	32030
	0,50 Euro	0,50 Euro



Nieren- und Harnwegserkrankungen

Nitrit, Protein, Spezifisches Gewicht, Blut, Leukozyten und pH-Wert.



Diabetes mellitus

Glucose und Keton.



Leber- und Galleerkrankungen

Bilirubin und Urobilinogen.



Teststreifen-Auswertegeräte
CombiScan 100, 500 und XL – die geeignete
Lösung für Arztpraxen bis hin zu Großlabors!



UriConnect: überträgt die Messdaten in die Patientenakte Ihrer Arztpraxis-Software.



CombiControl PN: einfache und zuverlässige Kontrolle der Messgeräte und Streifen.



Händlereindruck

**Analyticon
Biotechnologies AG**

Am Mühlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany

Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-30

info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com