

PHYSIOVAC-Expert

DAS VAKUUM-APPLIKATIONSGERÄT
MIT MIKROPROZESSOR-STEUERUNG



PHYSIOMED[®]
ELEKTROMEDIZIN

PHYSIOVAC-Expert – das Microprozessor-gesteuerte Vakuum-Applikationsgerät zur Kombination mit EXPERT-LINE Reizstromgeräten...

Das Vakuum-Applikationsgerät **PHYSIOVAC-Expert** ist die ideale Ergänzung zu dem Reizstromgerät **PHYSIOMED-Expert**, **PHYSIOMED-IF-Expert**, und dem Kombinationsgerät **IONOSON-Expert**.

Das **PHYSIOVAC-Expert** ermöglicht die einfache und rationelle **Applikation von Vakuumelektroden**, besonders auch an schwer zugänglichen Körperstellen. Das Gerät eignet sich auch zur eigenständigen **Saugwellentherapie**.

Durch sein ergonomisches Design wertet das **PHYSIOVAC-Expert** Ihre Gerätekombi-

nation zu einer repräsentativen und rationalen **Therapiestation** auf.

Übersichtliche Anordnung der Bedienelemente für **leichtes Handling**.

LED-Anzeige der Vakuumleistung.

Vacustop Elektroden (selbstschließend).

Selbstregelnder Vakuumkreis mit automatischer Pumpenabschaltung. Konstant geregeltes Vakuum.

Geräuscharme Arbeitsweise.

Stufenlos regelbare Pulsation zur Belegung der Therapie und Saugwellenmassage.

Wasserabscheider mit Füllstandsanzeige und automatischer Geräteabschaltung.

TECHNISCHE DATEN:

Vakuum: 0 – -0,6 bar
 Pulsation: 10-60 Pulsationen/min, stufenlos einstellbar
 Leistungsaufnahme: 45 VA
 Nennspannung: 230 V +/-10 %
 Klasse: 1, Typ BF
 Maße (B x H x T):
 345 x 129 x 416 mm
 Gewicht: 4,5 kg

STANDARDZUBEHÖR:

4 *Vacustop* Elektroden Durchmesser 60 mm
 8 Schwämme zu *Vacustop* Elektroden Durchmesser 60 mm
 4 Vakuum-Elektrodenkabel
 1 Reizstrom-Verbindungskabel
 1 Netz-Verbindungskabel
 1 Netzkabel
 1 Bedienungsanleitung

SONDERZUBEHÖR:


Vacustop Elektroden Durchmesser 90 mm
 Schwämme zu *Vacustop* Elektroden Durchmesser 90 mm
 Luran-Saugglocken zur Saugwellentherapie

WEITERES ZUBEHÖR:


siehe Zubehör-Liste

PHYSIOMED Geräte entsprechen den neuesten Sicherheitsnormen und den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes, werden nach aktuellen Standards der Qualitätssicherung gefertigt, sind baumustergeprüft und tragen das amtliche CE-Zeichen gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

ISO 9001

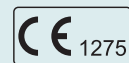

MADE IN GERMANY

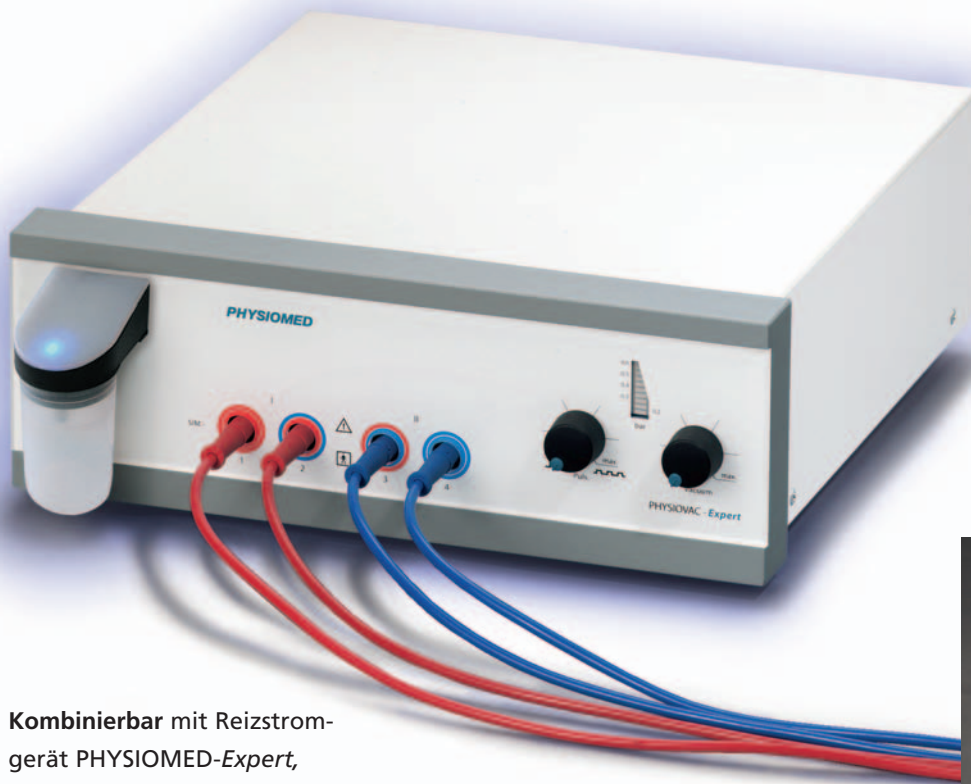


Kombinierbar mit Reizstromgerät **PHYSIOMED-Expert**, **PHYSIOMED-IF-Expert** und **IONOSON-Expert**.

Therapiestation mit

- Kombinationsgerät **IONOSON-Expert** (Elektrotherapie + Ultraschall)
- Vakuum-Applikationsgerät **PHYSIOVAC-Expert**
- Zubehörschale
- Gerätewagen



T E C H N O L O G Y F O R T H E R A P Y



PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
 Hutweide 10
 D-91220 Schnaittach/Laipersdorf
 Germany

Tel.: +49 (0) 91 26/25 87-0
 Fax: +49 (0) 91 26/25 87-25
 E-mail: info@physiomed.de
 Web: www.physiomed.de